

SOLO CARE AQUA®

Soluzione Unica

Moisturising Effect
PER UN COMFORT CHE DURA
TUTTO IL GIORNO

Alles-in-één Vloeistof

Bevochtigend effect
VOOR LANGDURIG DRAAGCOMFORT

Per tutti i tipi di lenti a contatto morbide



Per istruzioni, avvertenze e precauzioni complete, consultare l'accluso foglio di istruzioni.

SOLOCARE AQUA è una soluzione unica/disinfettante che pulisce, risciacqua, disinfetta, conserva, rimuove le proteine e lubrifica tutti i tipi di lenti a contatto morbide.

SOLOCARE AQUA è una soluzione acquosa isotonica, anti-microbica/anti-batterica contenente: polyhexanide 0.0001% (principio attivo e conservante), Hydrolock (dexpanthenol e sorbitol), sodium phosphate, tromethamine, poloxamer 407, disodium edetate.

Questa confezione contiene la soluzione SOLOCARE AQUA e un portalenti antibatterico (che contiene argento) a perdere. Chiudere il flacone dopo l'uso.

Controllare che il sigillo di chiusura sia integro prima di usare il prodotto per la prima volta. Se già rotto, non utilizzare il prodotto. Dopo 3 mesi dall'apertura del flacone, gettare la soluzione rimasta. Consultare lo specialista di fiducia prima di cambiare sistema di manutenzione.



Voor alle zachte contactlenzen



Voor uitgebreide instructies, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen: raadpleeg de bijsluiting in de verpakking.

SOLOCARE AQUA is een alles-in-één desinfectievloeistof voor het reinigen, afspoelen, desinfecteren, bewaren, verwijderen van proteïnen en bevochtigen van alle zachte contactlenzen.

SOLOCARE AQUA is een isotonische, waterige antimicrobiële/antibacteriële oplossing bevattende: polyhexanide 0,0001% (actief bestanddeel en bewaarmiddel), Hydrolock (dexpanthenol en sorbitol), sodium phosphate, tromethamine, poloxamer 407 en disodium edetate.

Deze verpakking bevat SOLOCARE AQUA vloeistof en een antibacteriële wegwerp-lenshouder (welke zilver bevat).

Controleer de flaconverzegeling voor het eerste gebruik. Niet gebruiken indien deze verbroken is.

Flacon na gebruik goed sluiten.

Zodra de flacon open is, dient de overgebleven vloeistof na 3 maanden te worden weggegooid.

Raadpleeg uw contactlensspecialist alvorens van vloeistof te veranderen.

STERILE A




25°C



360 ml

Contiene MicroBlock™:
il portalenti
antibatterico

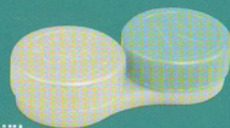

MicroBlock™ antibacteriële
lenshouder ingesloten

**CIBA
Vision®**
A Novartis Company

SOLO CARE AQUA®

All-in-One Lösung

Bewahrt die Feuchtigkeit
FÜR LANG ANHALTENDEN
TRAGEKOMFORT

Solution Multifonctions

Effet hydratant
POUR UN CONFORT TOUTE
LA JOURNÉE

360 ml

Für alle weichen Kontaktlinsen



Vollständige Informationen, Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen ersehen Sie aus der beigefügten Gebrauchsanweisung.

SOLOCARE AQUA ist eine Einflaschen Multifunktions-/ Desinfektionslösung zum Reinigen, Abspülen, Desinfizieren, Aufbewahren, Entfernen von Proteinen und Benetzen aller weichen Kontaktlinsen.


SOLOCARE AQUA ist eine isotonische, wässrige, antimikrobielle/antibakterielle Lösung, die 0,0001% Polyhexanide (aktiver Bestandteil und Konservierungsmittel), Hydrolock (Dexpanthenol und Sorbitol), Sodium Phosphate, Tromethamine, Poloxamer 407 und Disodium Edetate enthält. Diese Packung enthält SOLOCARE AQUA Lösung und einen antibakteriellen Austauschbehälter (enthält Silber).

Vor der ersten Anwendung Unversehrtheit der Flaschenversiegelung überprüfen. Nicht verwenden, wenn die Versiegelung beschädigt ist.

Flasche nach dem Gebrauch verschließen.

Geöffnete Flasche innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Restliche Lösung weggeben.

Fragen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten, bevor Sie zu einem anderen Pflegesystem wechseln.

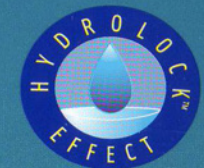

Pour toutes les lentilles de contact souples



Lire attentivement la notice incluse pour le mode d'emploi, les recommandations et précautions d'emploi.

SOLOCARE AQUA est une solution multifonctions de décontamination qui nettoie, rince, décontamine, conserve, déprotéinise et lubrifie toutes les lentilles de contact souples.

SOLOCARE AQUA est une solution aqueuse isotonique, antimicrobienne / antibactérienne contenant : polyhexanide 0,0001% (principe actif et conservateur), Hydrolock (dexpanthenol et sorbitol), sodium phosphate, tromethamine, poloxamer 407, disodium edetate.

Cette boîte contient la solution SOLOCARE AQUA et un étui-lentilles jetable antibactérien (contenant des ions d'argent).

Vérifier que le bouchon est bien scellé avant ouverture. Ne pas utiliser dans le cas contraire.

Bien refermer le flacon après usage.

Jeter la solution restante 3 mois après l'ouverture du flacon.

Consultez votre spécialiste en lentilles de contact avant de changer de solution d'entretien.

M = CIBA Vision Corporation
Duluth, GA 30097, USA
ER = CIBA Vision GmbH
63868 Grosswallstadt

CE 0086

Mit antibakteriellem
MicroBlock™ Behälter



Etui-lentilles antibactérien
MicroBlock™ à l'intérieur

**CIBA
Vision®**
A Novartis Company